



Zamýšlené použití


Whisper Swivel II je výdechový port pro použití pro více pacientů, který poskytuje kontinuální cestu úniku v okruhu pacienta při použití s přetlakovými zařízeními.

 Upozornění: Federální zákony USA omezují prodej tohoto zařízení pouze na lékaře nebo na jeho objednávku.

 Poznámka: Tento produkt není vyroben z přírodního kaučukového latexu nebo DEHP.


Kompatibilita


Toto příslušenství je kompatibilní s ventilátory Philips Respironics. Chcete-li ověřit kompatibilitu, nahlédněte do příručky příslušenství ventilátoru specifické pro vaše zařízení.

 Poznámka: Některá zařízení nemusí být dostupná na všech trzích. Další informace vám poskytne místní zástupce společnosti Philips Respironics.

▲ Varování

- Tělo Whisper Swivel II musí být zasunuto do objímky, dokud části nezapadnou do sebe, aby se zajistilo správné usazení (obrázek 1). Jinak může za určitých okolností dojít k udušení.
- Jako u většiny zařízení CPAP, při nízkých tlacích CPAP proudí vzduch skrz výdechový port nemusí stačit k odstranění veškerého vydechovaného plynu (CO₂) z masky. Můžete znovu vdechnout část vzduchu, který jste vydechli.
- Před prvním použitím vyčistěte. Denně kontrolujte poškození nebo opotřebení. Podle potřeby zlikvidujte a vyměňte všechny součásti.
- Toto varování platí pro téměř všechna zařízení CPAP. Whisper Swivel II by měl být používán se systémem CPAP doporučeným vaším zdravotníkem nebo respiračním terapeutem. Stejně jako u jakéhokoli výdechového zařízení si masku nepřikládejte na obličej, pokud není zařízení CPAP zapnuté a nepracuje správně. Aby bylo umožněno nepřetržité proudění vzduchu z masky, nikdy nesmí být zablokovány větrací otvory ve výdechovém portu. Když je zařízení CPAP zapnuté a funguje správně, nový vzduch ze zařízení CPAP propláchne vydechovaný vzduch ven ventilačními otvory výdechového portu. Když však zařízení CPAP nepracuje, maskou nebude zajištěn dostatek čerstvého vzduchu a vydechovaný vzduch může být znovu vdechován. Opakované vdechování vydechovaného vzduchu po dobu delší než několik minut může za určitých okolností vést k udušení.
- Nelepte díly Whisper Swivel II k sobě. Jinak za určitých okolností může dojít k opětovnému vdechování CO.

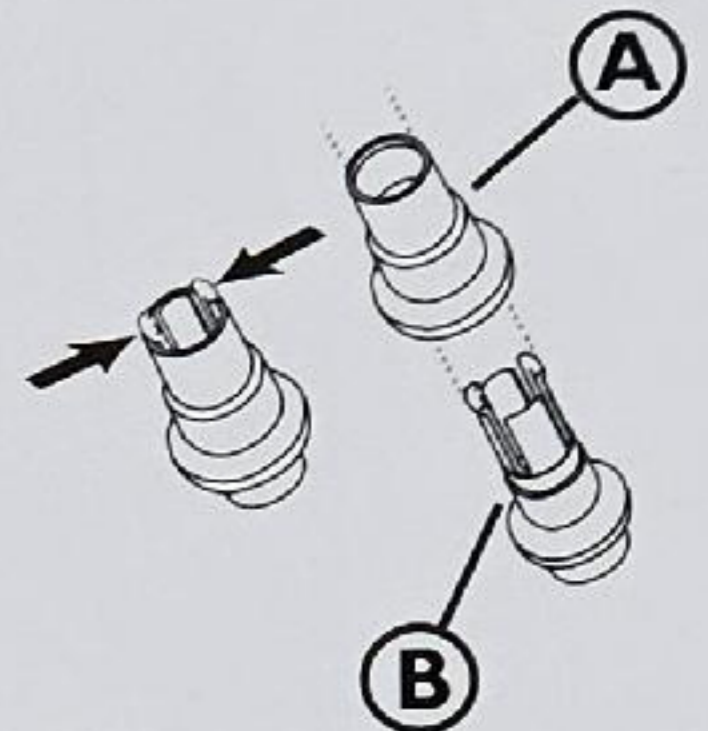


 Obrázek 1

A = rukáv
B = tělo

Návod k použití

Připojení Whisper Swivel II Připojte Whisper Swivel II k rozhraní pro pacienta maska, která nemá výdechový port nebo mechanismus.

 Obrázek 2

A = otočný konektor
B = Whisper Swivel II
C = Větrací otvory
(vydechovaný vzduch)

1. Pevně zasuňte horní konec Whisper Swivel II D = Flexibilní hadice do konce otočného konektoru masky (Obrázek 2). Lehce otočte obratník, abyste zajistili těsné utěsnění. Chcete-li snížit množství proudu vzduchu foukajícího na uživatele, umístěte otočný čep podle obrázku 2.
2. Připojte pružnou hadici k otočnému konci otočného čepu.

